

Apsveicam!

Jūs esat iegādājušies dārgu un kvalitatīvu produktu, kuru ir atzinuši visi pasaules vadošie stomatologi.

«Jetpik» irūdens irigators ar unikālu«Smart-Floss»jaunākās paaudzes sistēmu.

Tā ir ekskluzīva ierīce, kurai nav analogu. Tā arī saglabā jūsu zobu un smaganu veselību gan mājās, gan ceļojumos.

Sakām Jums paldies par izvēli un vēlam veselīgu smaidu ilgus gadus!

Jetpik

Modelis JP-50/200 PowerFloss System

Lietošanas instrukcija

1. Drošība
2. Iekārtas apraksts
3. Darba sākšana
4. Jetpik apkope
5. Bojājumu novēršana
6. Tehniskais raksturojums
7. Garantija

1. Drošība

Drošības instrukcija

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju

Brīdinājumi

*Neiegremdējiet lādētāju ūdenī vai citos šķidrums, nelietojiet lādētāju vannas laikā.

*Nelietojiet ierīci, ja tā iekritusi ūdenī vai citos šķidrums vai nedarbojas tā, kā būtu vajadzīgs.

*Neatstājiet un neglabājiet ierīci tādās vietās, no kurienes tā varētu nokrist vai iekrist vannā, izlietnē vai tualetes podā.

*Regulāri pārbaudiet lādētāja un kabeļa korpusu, un bojājumu gadījumā nomainiet to!

*Nepievienojiet lādētāju strāvas padevei, kuras stiprums atšķiras no tā, kas norādīts uz ierīces vai lādētāja.

*Strāvas adapteris Jetpick paredzēts darbam diapazonā: 100–240 volti.

*Ierīces Jetpick akumulatora lādētājs paredzēts savienošanai ar standarta USB portu ar pastāvīgo spriegumu: 4,75–5,25 volti.

*Lūdzu, nepievienojiet lādētāju strāvas padevei, kuras stiprums atšķiras no tā, kas norādīts uz ierīces vai lādētāja. Tas var radīt ierīces bojājumus.

*Virziet strūklas uzgali (sprauslu) tikai uz zobiem un smaganām. Spiediena rezultātā šī ierīce rada diezgan spēcīgu ūdens strūklu, kas, kombinēta ar ierīcē iestrādāto zobu diegu, var radīt bojājumus citiem orgāniem vai audiem.

*Izmantojiet šo ierīci atbilstoši jūsu stomatologa rekomendācijām un instrukcijai.

*Izmantojiet tikai tos izejmateriālus un aksesuārus, kurus izgatavojis vai ieteicis ražotājs.

*Nenometiet ierīci un neievietojiet neatbilstošus priekšmetus ierīces atverēs.

*Nelietojietmaiņstrāvasadapteriārpustelpas, unnekad nemēģiniet ar spēkuievietotkontaktdakšurozetē. Ja kontaktdakšu nav iespējamsviegliievietot kontaktligzdā, nemēģiniet turpinātun pamēģinietatrast citu rozeti vai nomainītstrāvas adapteri pret piemērotāku.

*Neizjauciet šo ierīci patstāvīgi (izņēmums: utilizācija). Šai ierīcei nav detaļu, kas būtu piemērotas pašu rokām veiktam remontam.

*Sazinieties ar ražotāju vai vietējo izplatītāju (pārstāvi jūsu reģionā), ja jūsu Jetpik vairs nedarbojas, kā būtu vajadzīgs, vai arī tam nepieciešams remonts.

*Jetpik nav paredzēts, lai to lietotu personas (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām un prāta spējām. Bērniem vienmēr jābūt uzraudzītiem, bet personām, kas ir atbildīgas par viņu drošību, ir jāsniedz skaidras instrukcijas saistībā ar šīs ierīces izmantošanu.

*Bērniem iesaka lietot irigatoru no sešu gadu vecuma, kad viņiem jau ir labas iemaņas tīrīt zobus ar zobubirsti un kad viņi var pastāvīgi tikt galā kustīgo uzgali.

*Glabājiet ierīci maziem bērniem nepieejamās vietās, lai izvairītos no nepamatotas ierīces lietošanas.

*Izvairieties no pārlietu liela ūdens spiediena strūkļas uzgalī. Nepārtrauciet ūdens plūsmu, piespiežot atveres sprauslu smaganām mutes dobuma irigācijas laikā, jo tas var sabojāt motoru.

*Lādētājunedrīkst atstāt,bez uzraudzībasieslēgtu tīklā,bet akumulatoralādētājs irjātur pēc iespējas tālāknokarstām virsmām. Sargājiet ierīcino tiešajiem saules stariem, ja tā ir pievienota elektrības avotam.

ievērojot šīs rekomendācijas, jūs daudz ātrāk saņemsiet vēlamo rezultātu.

Stipri un veseli zobi, protams, iepriecinās jūs!

Medicīniski ieteikumi

Jetpik ir ierīce personīgajai higiēnai un nav paredzēta, lai to izmantotu vairāki pacienti vienlaikus, kā arī nav paredzēta lietošanai stomatoloģiskajā praksē vai medicīniskajā iestādē.

Ja iepriekšējos divos mēnešos jums ir bijušas mutes dobuma vai smaganu ķirurģiskās operācijas, pakonsultējieties, lūdzu, ar savu zobārstu, pirms regulāri lietot šo ierīci.

Nav ieteicams lietot ierīci, ja ir paradontīta saasinājums vai pēc nenonemamu konstrukciju fiksācijas (ja nav pagājušas, minimums, 24 stundas).

Ja pēc šīs ierīces lietošanas vienu nedēļu ļoti asiņo smagana, vērsieties pie sava zobārsta!

Konsultējieties ar savu ārstējošo ārstu arī tad, ja jūs uztrauc jebkura cita medicīniska problēma.

Saglabājiet šo instrukciju!

*Neatstājiet un neglabājiet ierīci tādās vietās, no kurienes tā varētu nokrist vai iekrist vannā, izlietnē vai tualetes podā.

*Regulāri pārbaudiet lādētāja un kabeļa korpusu, un bojājumu gadījumā nomainiet to!

*Nepievienojiet lādētāju strāvas padevei, kuras stiprums atšķiras no tā, kas norādīts uz ierīces vai lādētāja.

*Strāvas adapteris Jetpik paredzēts darbam diapazonā: 100–240 volti.

*Ierīces Jetpick akumulatora lādētājs paredzēts savienošanai ar standarta USB portu ar pastāvīgo spriegumu: 4,75–5,25 volti.

*Lūdzu, nepievienojiet lādētāju strāvas padevei, kuras stiprums atšķiras no tā, kas norādīts uz ierīces vai lādētāja. Tas var radīt ierīces bojājumus.

* Virziet strūklas uzgali (sprauslu) tikai uz zobiem un smaganām. Spiediena rezultātā šī ierīce rada diezgan spēcīgu ūdens strūklu, kas, kombinēta ar ierīcē iestrādāto zobu diegu, var radīt bojājumus citiem orgāniem vai audiem.

*Izmantojiet šo ierīci atbilstoši jūsu stomatologa rekomendācijām un instrukcijai.

*Izmantojiet tikai tos izejmateriālus un aksesuārus, kurus izgatavojis vai ieteicis ražotājs.

*Nenometiet ierīci un neievietojiet neatbilstošus priekšmetus ierīces atverēs.

*Nelietojietmaiņstrāvasadapteriārpus telpas, unnekad nemēģiniet ar spēkuievietotkontaktdakšurozetē. Ja kontaktdakšu nav iespējamsviegliievietot kontaktligzdā, nemēģiniet turpinātun pamēģinietatrast citu rozeti vai nomainītstrāvas adapteri pret piemērotāku.

*Neizjauciet šo ierīci patstāvīgi (izņēmums: utilizācija). Šai ierīcei nav detaļu, kas būtu piemērotas pašu rokām veiktam remontam.

*Sazinieties ar ražotāju vai vietējo izplatītāju (pārstāvi jūsu reģionā), ja jūsu Jetpick vairs nedarbojas, kā būtu vajadzīgs, vai arī tam nepieciešams remonts.

*Jetpick nav paredzēts, lai to lietotu personas (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām un prāta spējām. Bērniem vienmēr jābūt uzraudzītiem, bet personām, kas ir atbildīgas par viņu drošību, ir jāsniedz skaidras instrukcijas saistībā ar šīs ierīces izmantošanu.

*Bērniem iesaka lietot irigatoru no sešu gadu vecuma, kad viņiem jau ir labas iemaņas tīrīt zobus ar zobubirsti un kad viņi var pastāvīgi tikt galā kustīgo uzgali.

*Glabājiet ierīci maziem bērniem nepieejamās vietās, lai izvairītos no nepamatotas ierīces lietošanas.


*Izvairieties no pārlietu liela ūdens spiediena strūklas uzgalī. Nepārtrauciet ūdens plūsmu, piespiežot atveres sprauslu smaganām mutes dobuma irigācijas laikā, jo tas var sabojāt motoru.


*Lādētājunedrīkst atstāt,bez uzraudzībasieslēgtu tīklā,bet akumulatoralādētājs irjatur pēc iespējas tālāknokarstām virsmām. Sargājiet ierīcino tiešajiem saules stariem, jātā ir pievienota elektrības avotam.




Ievērojot šīs rekomendācijas, jūs daudz ātrāk saņemsiet vēlamo rezultātu.

Stipri un veseli zobi, protams, iepriecinās jūs!

2. Iekārtas apraksts

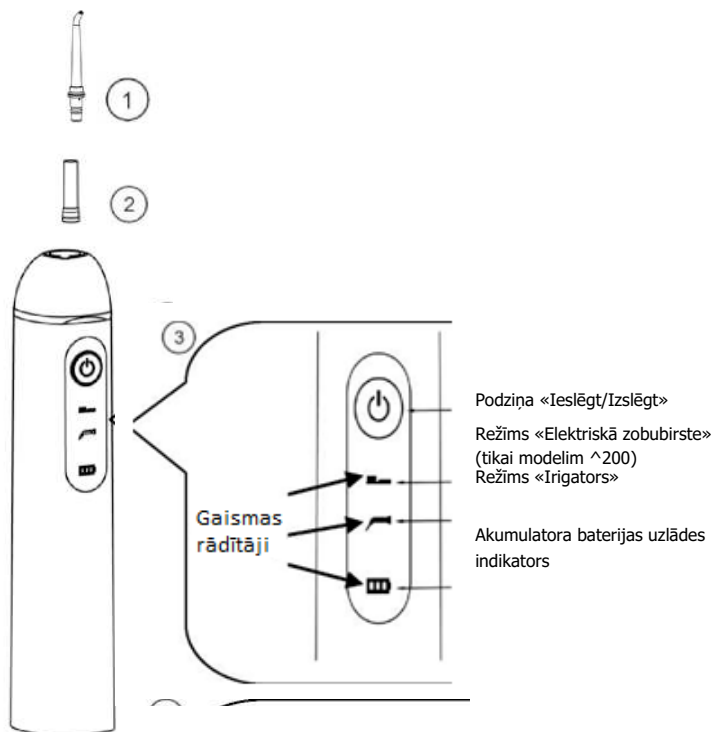

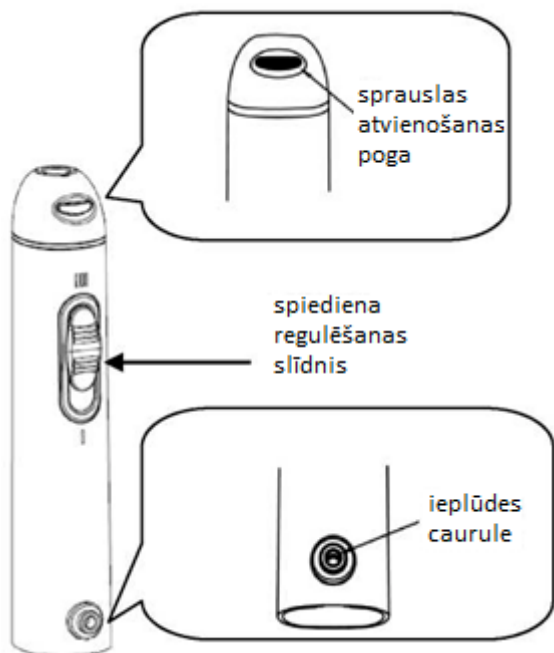

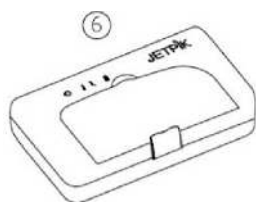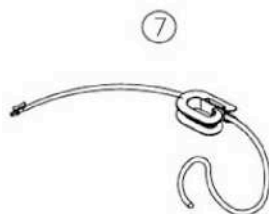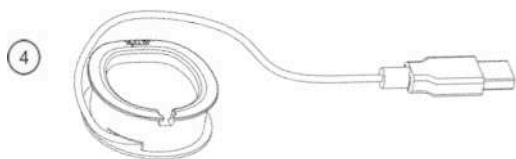

1. Strūklas sprausla
- 2.Kapsula ar zobu diegu
3. Korpuss
4. Lādētājs
- 5.Strāvas adapteris
6. Ceļojuma futrālis
7. Ūdens padeves šļūtene
- 8.Ultravioletais sterilizators
9. Ūdens trauks

3. Darba sākšana

Darba sākums


Sākotnējā akumulatora baterijas uzlāde

Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet Jetpik 24 stundas.

Pievienojiet lādētāju strāvas avotam un novietojiet korpusu uz paliktņa. Mirdzošā zaļā gaismas diode rāda, ka ierīce lādējas.

Zaļās gaismas diodes pāreja no mirdzošas uz pastāvīgu norāda, ka akumulatora baterija ir pilnībā uzlādēta.

Jetpik sagatavošana lietošanai

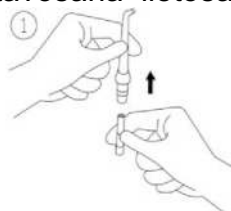

Ja plānojat izmantot zobudiega sistēmu, ievietojiet zobu diega sprauslu strūklas uzgalī (1)

Pievērsiet uzmanību: Jetpik neieslēgsies, ja zobu diega kapsula būs ievietota nepareizi.

Pievienojiet smidzināšanas uzgali korpusam (2).
Lai izmantotu trauku, ko paredzēts lietot kopā ar ierīci, -
ievietojiet pagarinātās šļūtenes mainīgo galu Jetpick
korpusā(3), izstiepiet šļūteni sev ērtā garumā un
piepildiet trauku ar ūdeni.

Lai izmantotu ierīci pārgājiena režīmā, ievietojiet ātro
sakabi ūdens padeves šļūtenes vienā galā Jetpick
korpusa ieplūdes caurulē. Izmantojiet ūdens padeves
šļūtenes spoli, lai nostiprinātu citu tās galu glāzē vai citā
ūdens traukā.

Pievērsiet uzmanību: šļūtenes galam ūdens traukā jābūt
pilnībā iegremdētam ūdenī.

Sagatavojiet zobu diegu

Noklikšķiniet un velciet slīdņi, lai kontrolētu spiedienu
augšējā pozīcijā III, lieciet sprauslu izlietnē un nospiediet
"On / Off". Pagaidiet dažas sekundes, līdz esat
pārliecināts, ka ūdens sāk tecēt pēc sprauslas
atvēršanās. Pēc tam izslēdziet ierīci, vēlreiz nospiežot
pogu "On / Off".


Apsveicam!

Jūs esat iegādājušies dārgu un kvalitatīvu produktu, kuru
ir atzinuši visi pasaules vadošie stomatologi.

«Jetpick» ir ūdens irigators ar unikālu «Smart-Floss»
jaunākās paaudzes sistēmu.


Tā ir ekskluzīva ierīce, kurai nav analogu. Tā arī saglabā
jūsu zobu un smaganu veselību gan mājās, gan
ceļojumos.

Sakām Jums paldies par izvēli un vēlām veselīgu smaidu
ilgus gadus!

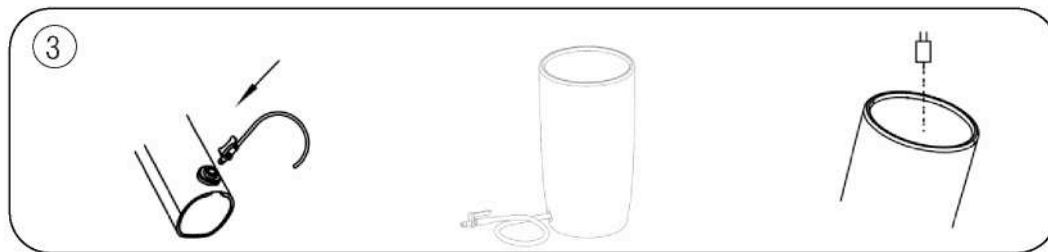


Lietošana

Ja nekad iepriekš neesat lietojuši irigatoru, pirms sākt to lietot, ir ieteicams uzstādīt spiediena regulētāju pirmajā

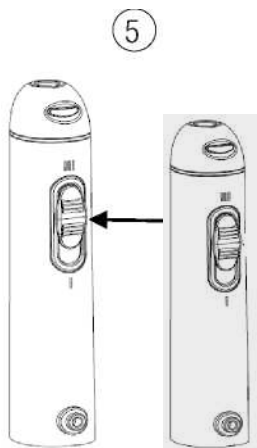

pozīcijā. Jūs varat pakāpeniski palielināt spiedienu ar noteikumu, ka neizjūtat diskomfortu un jums neasiņo smaganas.

Noliecieties pār izlietni, virziet sprauslas galu uz zobu

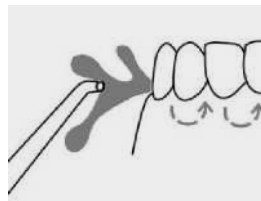

pusi un nospiediet pogu «leslēgt/lzslēgt». Virziet ūdens strūklu tā, kā parādīts zīmējumā, un pakāpeniski virziet no viena zoba pie cita. Viegli sakniebiet lūpas, lai izvairītos no apšļakstināšanās, bet tajā pašā laikā ļaujiet ūdenim viegli tecēt no mutes izlietnē. Lai sasniegtu vislabāko rezultātu, nedaudz apstādiniet ūdens strūklu pretim zobu starpām, lai zobu diegs pilnībā tās iztīrītu. Turpiniet tik ilgi, kamēr nebūs attīrīti visi rajoni ap zobiem un zobu starpas.


Pievērsiet uzmanību: lai sasniegtu vislabāko rezultātu smaganu kopšanā, zobu starpu un brekešu tīrīšanā, kapsula ar zobu diegu ir jāmaina ik pēc 25-30 lietošanas reizēm.

Zobu tīrīšanas funkcijas izmantojums ar ultraskaņas zobubirsti (tikai modelim JP 200)



Pievienojiet ultraskaņas zobubirstes galviņu Jetpick korpusam tā, kā tas ir parādīts zīmējumā. Ja šajā vietā ir izvietota ūdens smidzināšanas sprausla, tā ir jānoņem un jānomaina ar elektriskās zobubirstes galviņu.

Uzlieciet nepieciešamo zobupastas daudzumu uz zobubirstes un pietuviniet to zobu virsmai. Nospiediet pogu «leslēgt/lzslēgt», lai «iedarbinātu» zobubirsti.

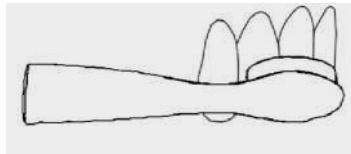

Lai ultraskaņas zobubirsti izslēgtu, nospiediet pults podziņu «leslēgt/lzslēgt».

Nelietojiet maiņstrāvas adapteri ārpus telpas, unnekad nemēģiniet ar spēku ievietot kontaktdakšurozetē. Ja kontaktdakšu nav iespējams viegli ievietot kontaktligzdā,

nemēģiniet turpinātun pamēģinietatrast citu rozeti vai
nomainītstrāvas adapteri pret piemērotāku.

4. Jetpik apkope

Jetpik apkope

Ja Jetpik kādu laiku nelietojat, iztīriet to un glabājiet sausu.

Ja mutes dobuma skalošanā esat izmantojuši antibakteriālus šķīdumus, ierīces mazgāšanā lietojiet krāna ūdeni vai tīru ūdeni.


Pirms paņemt ierīci braucienā, ieslēdziet Jetpik dažas sekundes, lai likvidētu pēdējās ūdens paliekas.

Ultravioletā sanitārā mezgla lietojums (opcija)

ULTRA komplektācijas modeļi ir aprīkoti ar ultravioleto sanitāro mezglu, kas paredzēts ūdens strūklas sprauslu dezinfekcijai un ultraskaņas zobubirstes (vai jebkuras citas zobubirstes) dezinfekcijai.

Izvelciet ultravioletā sanitārā mezgla paplāti (G) un ievietojiet tajā ūdens strūklas sprauslu (ne vairāk kā divas) un atbilstošus fiksatorus uz paliktņa. Ultravioletajā dezinfekcijas paliktņi jūs varat ievietot arī tam paredzētajā Jetpik ierīces atverē, kā parādīts G zīmējumā.

Bīdīet paplāti aizvērtā stāvoklī (sterilizators nedarbosies, ja paplāte nebūs aizvērta pilnībā). Novietojiet sterilizatoru uz lādētāja paliktņa un pārliedziniet, ka lādētājs ir pievienots atbilstoša sprieguma elektroenerģijas avotam (3). Sterilizatorā iedegsies zaļā gaismas diode, bet augšējā sterilizatora lodziņā varēs ieraudzīt gaiši zilu gaismiņu. Dezinfekcija ilgst apmēram 10 minūtes, pēc tam ierīce automātiski izslēdzas

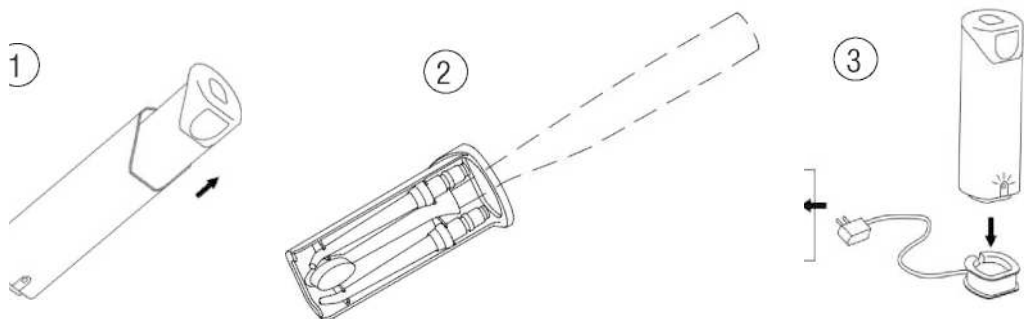

Utilizācija

Pēc ierīces ekspluatācijas termiņa beigām un pirms utilizācijas, lūdzu, izņemiet akumulatora bateriju no plastmasas korpusa, pirms tam to rūpīgi sabojājot. Pēc tam, lai izvilktu akumulatora bateriju no Jetpik, pārgrieziet vadus. Tagad jūs droši varat atdot akumulatora bateriju pārstrādei vai utilizācijā, kā tas noteikts vietējā likumdošanā. Pārējās ierīces daļas var utilizēt tieši tādā pašā veidā.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU! Akumulatora bateriju nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem - tā ir jāatstāj atbilstošos savākšanas punktos.

5. Bojājumu novēršana

Bojājumu meklēšana un novēršana

Bojājums	Iemesls	Ko darīt
Jetpik darbojas, bet ūdens no strūklas sprauslas netek.	Nepareizi ievietota kapsula ar zobu diegu vai ir beidzies kapsulas derīguma termiņš. Ir aizserējusies ūdens padeves	Ievietojiet kapsulu ar zobu diegu pareizi vai nomainiet to. Izskalojiet šļūteni vai nomainiet to! Nomainiet un vēlreiz pievienojiet sprauslu.

Jetpik nevar iedarbināt.		Pārlicinieties, ka lādētājs funkcionē un aparātā deg zaļā gaismas diode, kad jūs ieviejojat ierīci paliktņī. Pilnībā
Nedarbojas ultraskaņas zobubirste. Bet dzinējs korpusa iekšienē	Zobu birstes galviņa atrodas nepareizā stāvoklī vai arī ir apstājies zobu birstes motorī.	Izvelciet un vēlreiz ieviejojiet zobu birstes galviņu korpusā. Nomainiet zobu birstes galviņu.

Ultravioletā sterilizatora augšējā lodziņā nav redzama gaiši zilā gaismiņa vai uz korpusa neiedegas zaļā gaismas	Sterilizators nav pievienots strāvas avotam. Lādētājs ir bojāts. Ultravioletais sterilizators ir bojāts.	Pārbaudiet maiņstrāvas adapteri un vadu, lai pārlicinātos, ka tie ir pilnībā iesprausti kontaktligzdā. Atkārtoti spiediet paplāti atpakaļ sterilizatorā. Nomainiet ultravioleto
--	--	---

6. Tehniskais raksturojums

Tehniskais raksturojums

Sprieguma diapazons: 100-240 volti ar maiņstrāvu 50-60Hz.

Akumulators: 5 volti, ne mazāk kā 1000 mA/h.

Uzlādes laiks: 10-15 stundas (pirmās uzlādes laiks: 24 stundas).

Darbības ilgums: 25-30 nepārtrauktas darbības (pēc pilnībā uzlādēta akumulatora).

7. Garantija

Ražotājs piešķir divu gadu (24 mēneši) garantiju Jetpik produkcijai, sākot no tā iegādes brīža. Ja precei konstatēti bojājumi, par kuriem ir atbildīgs ražotājs, viena gada garantija sniedz jums tiesības uz bezmaksas remontu vienu gadu. Garantijas apkalpošana ir bez maksas, ieskaitot remontdarbu izpildi un nepieciešamo materiālu izmaksas. Pilnvarotā organizācija, kas rūpējas par garantijas apkopi, pieņem precī, lai pārbaudītu tās kvalitāti un veiktu garantijas remontu. Garantijas remonts tiek veikts 20 darbdienu laikā (var būt pamatots laika pagarinājums) kopš preces iesniegšanas brīža pilnvarotajā preces apkopes organizācijā. Ja ir pretenzijas par preces kvalitāti, vērsieties pie pilnvarotās organizācijas, kas veic garantijas apkopi. Ja jūsu pilsētā nav šādas organizācijas, jūs varat vērsties uzņēmumā (medicīnas iestādē, internetveikalā un citur), kur iegādāta konkrētā prece.

Šī garantija nav derīga:

*Precēm, kas ir ieguvušas defektus, jo nav lietotas atbilstoši mērķim, un (vai) lietotas neapdomīgi vai nolaidīgi (ieskaitot pārslodzi), kas radījuši bojājumus, pārveidojumus; ja šo precī remontējusi nepilnvarota organizācija (arī privāta persona); ir pārkāpti ekspluatācijas un (vai) uzglabāšanas noteikumi; nav ievērota pareiza preces transportēšana.

*Precēm, kas nedarbojas vai ir ieguvušas defektus, kas pieslēgta pie nepareiza elektrības padeves avota.

*Precēm, kas ekspluatētas, arī bojātas, un (vai) izmantojot tādus aksesuārus vai materiālus, kurus nav apstiprinājis ražotājs (nekvalitatīvi vai jau izsmēluši savus

resursus).

*Netiek pieņemtas preces ar bojājumiem, kas radušies no ražotāja neatkarīgu iemeslu dēļ, - piemēram, trešo personu iejaukšanās, dabas stihijas, mājdzīvnieki un meža dzīvnieki, kukaiņi; ja ierīcē iekļuvuši dažādi šķidrumi vai svešķermeņi.

*Pret ārējo un iekšējo piesārņojumu, skrāpējumiem, plaisām un citiem mehāniskiem bojājumiem, kas radušies dabiskās ekspluatācijas laikā.

*Ja bojātas zobu diegu kapsulas, ūdens strūkļas sprauslas, glāzes ar ūdens padevi, ultraskaņas zobu birstu galviņas, kas nav JETPIK aparatūras neatņemama sastāvdaļa.

*Tīrīšanai un JETPIK irigatora detaļu tehniskai apkopei.

Atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem **ATBILSTOŠAS KVALITĀTES** medicīniskos instrumentus, ierīces un aparatūru **NAV PAREDZĒTS** atdot vai apmainīt pret analogu precī (cita dizaina, modeļa, izmēra u. c.).

Lai saņemtu garantijas servisu, jums ir jāsniedz dokumenta oriģināls (garantijas talons), pati ierīce.

Garantijas apkopē **NETIEK PIENĒMTI** JETPIK irigatori, kuru individuālo sērijas numuru nav iespējams identificēt pilnībā.